PULSE Watch2



2023年8月版

パルスオキシメータ

パルスウォッチ2 PMP-200GplusX2







- 内蔵のGセンサで体動を検出
- 充電式バッテリを内蔵
- 電源ON/OFF に誤操作を防ぐスライド式スイッチ採用
- 圧迫感が軽減するよう反射型SpO₂プローブを採用



解析ソフト RECT

(解析ソフトRECT:認証番号227AABZX00117000)

パルスオキシメータ用 プログラム

- [SpO₂] [脈拍]の移動平均を可変 1~8秒、1~8拍を任意に設定可能。
- 脈拍数変動周波数成分の波形表示 脈拍数変動周波数成分 LF (低周波成分)、HF (高周波成分) に加えて、 LF/HF 比を波形表示。
- 睡眠レベルの表示

LF、HF と LF/HF 比から睡眠レベルを、


W (Wake)、R (REM)、L (Light)、D (Deep) の4段階で表示します。 (東芝ホームアプライアンス㈱のソフトウェアをベースにしています)


レポート出力

必要な情報を自由に 選択・レイアウトした レポート出力が可能。





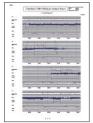

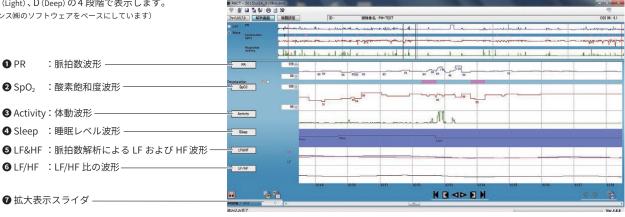

パルスウォッチ2 PMP-200 Gplus X2 仕様					
SpO ₂	測定範囲:36~100%SpO ₂ 測定精度:70~100%SpO ₂ ±2digits 60~69%SpO ₂ ±3digits 59%SpO ₂ 以下 規定せず				
脈拍数	測定範囲:24~250回/分 測定精度:±2% または2回/分のうち大きい方				
体動	検出方式:加速度センサ				
表示	LCD				
測定データ	3チャンネル (SpO ₂ 、脈拍数、体動)				
最大記録時間	約 220 時間				
電源	充電式リチウムイオンバッテリ				
バッテリ容量	連続測定時間:約20時間				
 寸法	80(幅)×47(奥行)×27(高)mm				
重量	約60g (バッテリ含む)				
温度条件	使 用 時:0~+40℃ 輸送及び保管時:-10~+50℃				
湿度条件	使 用 時:10~90% (結露なし) 輸送及び保管時:10~95% (結露なし)				
販売名	パルスウォッチ 2				

構成品

PMP-200GplusX2 本体 SpO₂プローブ (長時間モニタセンサ)

本体ベルトS ACアダプタ

フィンガーストリップW サージカルテープ

取扱説明書

クイックスタートガイド

商品名	商品コード No.	JAN ⊐ − ド	リファレンス No.	認証番号
パルスウォッチ 2 PMP-200GplusX2	162 02 050	4580274065401	PDT-PMP200GPX	305AFBZX00054000
解析ソフト RECT	162 22 010	4580274104391	PDT-PSW006	227AABZX00117000

オプション	商品コード No.	JAN ⊐− ド	リファレンス No.	届出番号
本体ベルトS (28cm) (5 本入)	162 22 090	4580274104476	PDT-OP-PWJ026	_
長時間モニタセンサ S (33cm)	162 22 020	4580274104407	PDT-OP-PWJ022	13B1X00181000010
成人用クリッププローブ	162 22 035	4580274105930	PDT-OP-PWJ061	11B1X00001000062
成人用クリッププローブ S	162 22 040	4580274104421	PDT-OP-PWJ086	13B1X00181000011
小児用クリッププローブ	162 22 050	4580274104438	PDT-OP-PWJ062	13B1X00181000011
成人用モニタプローブ	162 22 060	4580274104445	PDT-OP-PWJ063	13B1X00181000012
小児用モニタプローブ	162 22 070	4580274104452	PDT-OP-PWJ064	13B1X00181000012
フレックスプローブ	162 22 080	4580274104469	PDT-OP-PWJ067	13B1X00181000013
PMP-200用ポーチ	162 22 110	4580274110859	MX-1P001C	_
専用 AC アダプタ	162 21 160	4580274104360	PDT-OP-PWJ071	-
フィンガーストリップ W 成人用(10入)	162 21 050	4580274104254	PDT-OP-PWJ045	_
フィンガーストリップ W 小児用 (10入)	162 21 060	4580274104261	PDT-OP-PWJ082	-

日本総 イン・アイ株式会社

本社 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12 TEL.048(988)4411(代) FAX.048(961)1350

お問合せ先

お近くの顧客サービスセンターへご連絡ください。 Webからのお問合せも受け付けております。

https://www.imimed.co.jp

