

白いボディ、青い波形の パルスオキシメータ。

お子様や指の細い方には、
かわいいキャラクターのサーフィンPO (ミニ)



PO mini
Surfing

パルスオキシメータ サーフィンPO (ミニ)



PO
Surfing


パルスオキシメータ サーフィンPO




便利な 6 モード設定
ワンタッチボタン切り替え

6 モード表示切替機能を備えたカラーディスプレイを採用。
薄暗い場所でも、左右どちらの指にしても、測定値等が見やすく表示できます。


モード 1 右手で計測

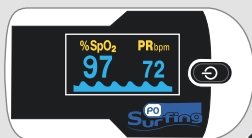

モード 2 波形を変更

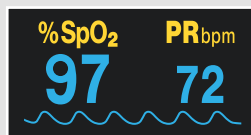

モード 3 文字を大きく
波形を脈拍バーに

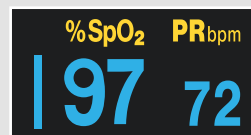

モード 4 左手で計測



モード 5
対面計測しやすく



モード 6 指を上にして計測



■ 6 モードワンタッチ表示切り替え

- ・ 左右の指で測定・波形の変更可。
- ・ 対面計測等が容易。

■ 暗闇でも見やすい カラーディスプレイ

- ・ 数値、脈波波形はブルー、電池残量はイエローで見やすく、鮮明に表示。

■ 10 段階の明るさ調整機能

- ・ どんな計測状態においても、しっかり見やすい画面の明るさを調整。


■ 自動 OFF 機能の省エネ設計

- ・ うっかり消し忘れの心配がなく、無駄な電池消費を防止。


■ 各部の名称



■ ディスプレイ表示

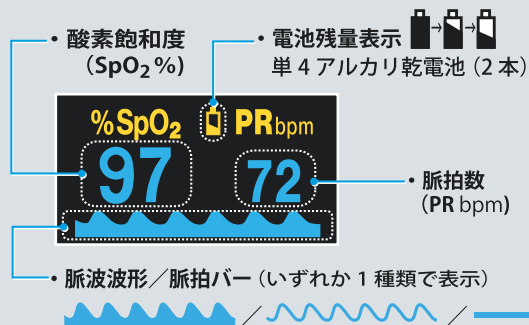

■ 本体上面

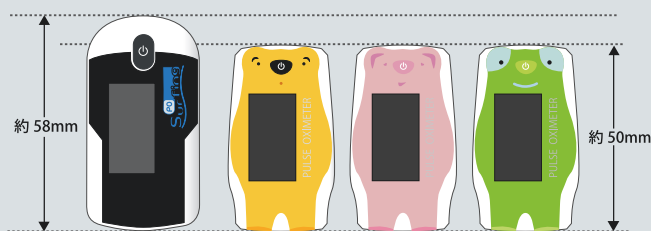


【サーフィンPO】

【サーフィンPO（ミニ）】

黄：くま 3343351 / ピンク：ぶた 3343352 / 緑：カエル 3343353

■ ホール部分

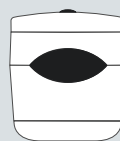

【サーフィンPO】



【サーフィンPO（ミニ）】

サーフィンPO（ミニ）のホールは、指の細い方にフィットするサイズ、形状になっています。
※指のサイズは、太さ10mm×長さ30mm以上が必要です。

■ 仕様

一般的名称	パルスオキシメータ	
販売名	サーフィンPO	
認証番号	221AKBZX00060000	
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器	
品名	サーフィンPO	サーフィンPO（ミニ）
サイズ	H34×W32×D58mm	H28×W28×D50mm
重さ	32g（単4電池含まず）	25g（単4電池含まず）
対象	小児～成人	
温度	使用時：5～40℃ 保管時：-10～40℃	
湿度	使用時：15～80%RH 結露なきこと 保管時：10～80%RH 結露なきこと	
電源	単4アルカリ乾電池2本（連続約30時間使用可能）	

機能	SpO ₂	測定範囲	30～250bpm
		測定精度	
脈拍数		測定範囲	30～250bpm
		測定精度	30～99bpm：±2bpm 100～250bpm：±2%

- ・ 6モード表示切替（※）
- ・ 10段階輝度調整（※）
- ・ データ更新期間：8秒以内
- ・ 生体信号の不適切性表示：“？”を表示
- ・ 過度の温度に関する保護：41℃を超えないこと

※電源を切るたびにデフォルト設定（モード1表示／輝度レベル4）となります。

⚠ 注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。 ●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。 ●画像は一部合成です。

【製造販売元】

株式会社 小池 メディカル

〒132-0031 東京都江戸川区松島1-24-8

TEL:03(5662)6605

www.koike-medical.co.jp



■お問い合わせは…